

Работа с образцами - Регистрация образцов (процедурный кабинет)

- Работа с пациентом
 - Идентификация пациента
 - Сбор данных о пациенте
 - Данные об оральных контрацептивах
 - Данные о беременности
 - Просмотр и изменение данных пациента
 - Удаление данных пациента
 - Окончание работы с пациентом
- Работа с образцами пациента
 - Просмотр списка образцов
 - Изменение текущего образца
 - Регистрация образца
 - Отмена регистрации образцов
 - Просмотр списка услуг

Работа с пациентом

Идентификация пациента

Для идентификации пациента следует с клавиатуры ввести номер карты пациента и нажать кнопку Enter.

Регистрация образцов

15:48

Пациент | Аттрибуты | Контейнеры | Регистрация

Номер карты:

Лаб номер:

ФИО:

Пол:

Дата рождения:

Возраст:

Населенный пункт:

Кисель А.Н.

Регистрация образцов №6280 - Чередник Фабьен Бернадетт Александровна Ж 21

08:51

Регистрация образцов


Пациент | Атрибуты | Контейнеры | Регистрация

Номер карты:	6280
Лаб номер:	187
ФИО:	Чередник Фабьен Бернадетт Александровна
Пол:	Ж
Дата рождения:	31.03.1988
Возраст:	21
Населенный пункт:	Иркутск г

Кисель А.Н.

Если номер пациента введен не верно, на экране появится сообщение:

Внимание!

 У данного пациента нет лабораторного номера. Продолжение работы не возможно.

OK

Сбор данных о пациенте

После идентификации пациента переходим к следующей вкладке. Здесь указываются атрибуты регистрации образцов.

Данные об оральных контрацептивах

Чтобы указать информацию о приеме оральных контрацептивов, следует нажать на клавиатуре соответствующие кнопки Да (F2), Нет (F4), Неизвестно (F12).

Регистрация образцов №6280 - Чередник Фабьен Бернадетт Александровна Ж 21

08:54

Регистрация образцов

Пациент | **Аттрибуты** | Контейнеры | Регистрация


принимает оральные контрацептивы?

Да Нет Неизвестно

Кисель А.Н.

Данные о беременности

Указываем информацию о беременности пациентки. Для этого в поле Срок беременности следует указать количество недель, или выбрать варианты ответов нажатием кнопки Нет (F4), Неизвестно(F12).

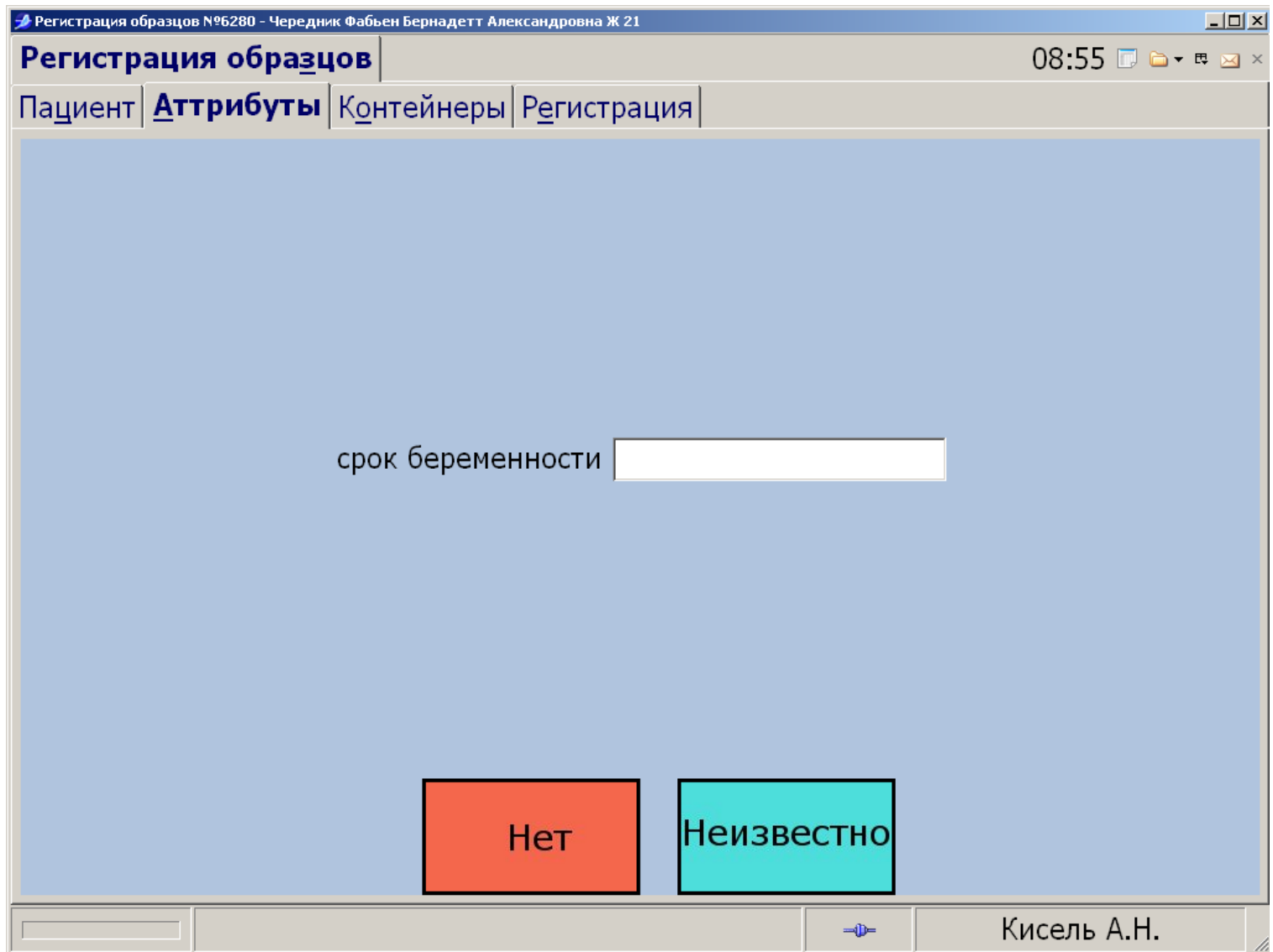

Просмотр и изменение данных пациента

Для просмотра информации о пациенте следует перемещаться по вкладкам нажатием кнопок Назад (F6), Вперед (Enter).

Для изменения информации о пациенте следует открыть вкладку, в которой мы собираемся изменять информацию, затем Удалить то свойство, которое нужно изменить нажатием кнопки F8, после этого заново ввести информацию.

Удаление данных пациента

Для удаления информации о пациенте следует открыть вкладку, в которой мы собираемся удалять информацию и нажатием кнопки F8 (Удалить) произвести удаление.


Окончание работы с пациентом

Для окончания работы с пациентом на клавиатуре следует нажать кнопку В начало (Esc). Откроется главное окно программы.

Работа с образцами пациента

Просмотр списка образцов

Для просмотра списка образцов, следует выбрать вкладку Контейнеры. В этой вкладке отображаются все зарегистрированные образцы анализов пациента.

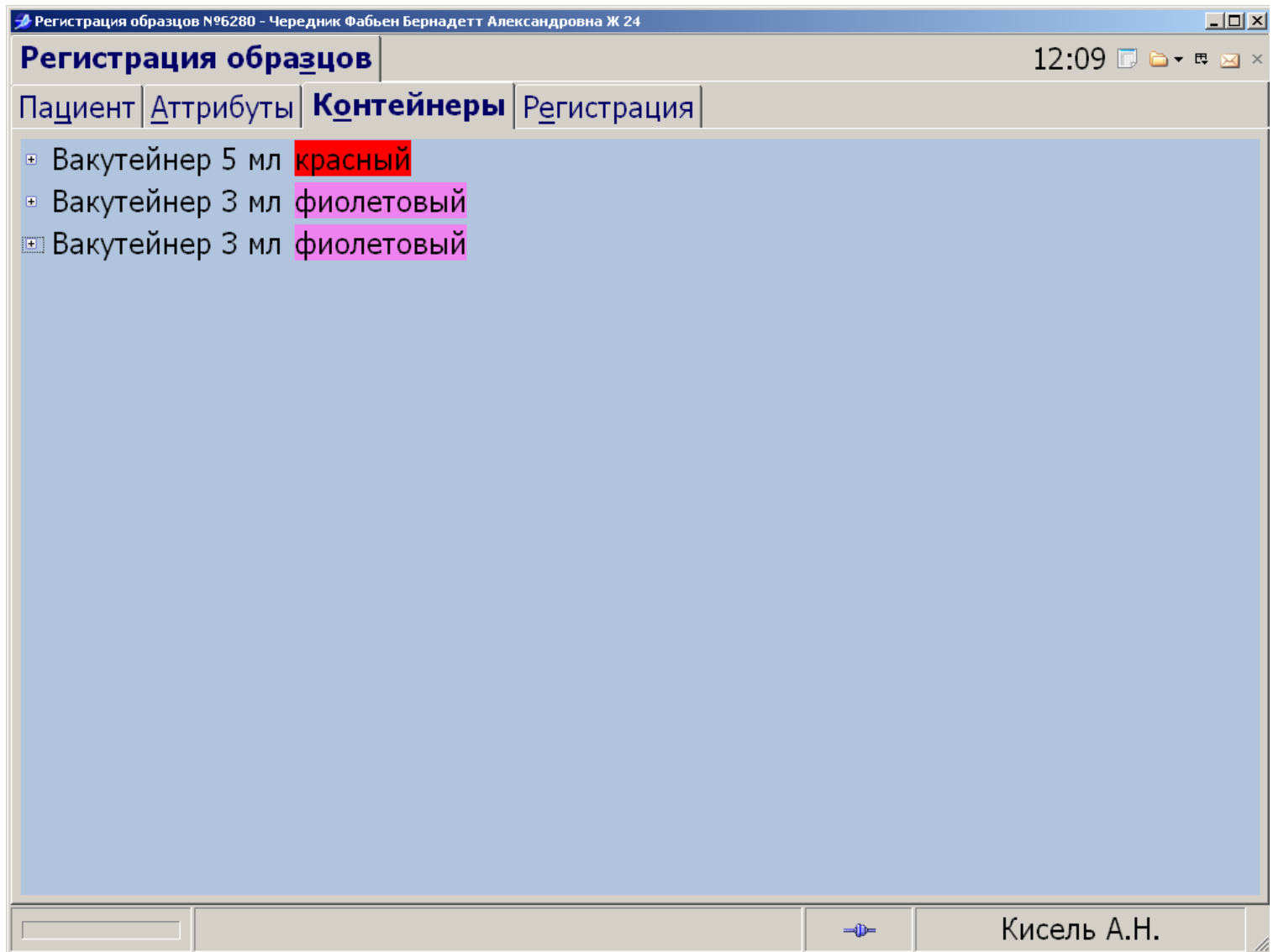

Изменение текущего образца

Для изменения текущего образца, во вкладке Регистрация, следует сначала удалить номер этого образца нажатием кнопки F8, затем ввести номер образца заново, либо считать его сканером штрих-кодов.

Регистрация образца

Для регистрации образца, следует в поле Номер считать штрих-код образца с пробирки. Если он не считывается, ввести его вручную. При наведении курсора мыши в поле номера образца, всплывает подсказка, для каких услуг этот образец был взят.

Регистрация образцов №6280 - Чередник Фабьен Бернадетт Александровна Ж 21

09:03

Пациент | Атрибуты | Контейнеры | **Регистрация**

Название	Объем	Цвет	Нагрузка	Номер
Вакутейнер	5 мл	красный		9894
Вакутейнер	3 мл	фиолетовый		9893
Вакутейнер	3 мл	фиолетовый		

2Ж2001 Полный гематологический анализ

Кисель А.Н.

Отмена регистрации образцов

Для отмены регистрации образцов следует нажать кнопку Удалить (F8), затем ввести бар-код каждого зарегистрированного образца. Таким образом будет произведена отмена регистрации образцов.

Просмотр списка услуг

Для просмотра списка услуг следует открыть вкладку Контейнеры. Все услуги разбиты по контейнерам, называемыми Вакутейнерами. В каждом вакутейнере находятся определенные услуги.

Регистрация образцов

▣ Вакутейнер 5 мл **красный**

- 2Ж1004 Аланинаминотрансфераза
- 2Ж1006 Альбумин
- 2Ж6027 Хорионический гонадотропин
- 2Ж6028 Лютеинизирующий гормон
- 2Ж6030 Эстрадиол
- 2Ж6031 Прولاктин
- 2Ж6074 Антитела к лямблиям (ИФА)

▣ Вакутейнер 3 мл **фиолетовый**

- 2Ж1005 Гликированный гемоглобин (кровь с ЭДТА)

▣ Вакутейнер 3 мл **фиолетовый**

- 2Ж2001 Полный гематологический анализ



Кисель А.Н.